

GUIDA

**COME ESEGUIRE  
IL PRELIEVO DI  
SANGUE CAPILLARE**

# COSA È INCLUSO NEL KIT

## PER IL PRELIEVO



1

**MICROTAINER**



2

**DEVICE**



3

**CARTINA  
CON ALCOL**



4

**CEROTTO**



5

**PROVETTA  
CON BARCODE**

## PER LA SPEDIZIONE



A

**BIOHAZARD  
BAG PICCOLA**



B

**BIOHAZARD  
BAG GRANDE**



C

**SCATOLA  
BIANCA**



D

**BUSTA DI  
SPEDIZIONE**

## STEP 1

# Preparazione Device

Lava le mani sotto acqua corrente.

Dalla scatola prendi la **microtainer dal tappo giallo (1)** e togli il tappo; **inserisci con leggera pressione la microtainer nel Device (2)** fino a raggiungere il corretto incastro (vedi foto).



## STEP 2

### Zona da trattare


**Utilizza la cartina imbevuta d'alcol (3) per pulire la zona su cui vuoi effettuare il prelievo e riscaldala bene, con movimenti circolari per migliorare l'afflusso di sangue capillare.**



## Come applicare il Device

Rimuovi il tappo di protezione del Device (2),  
senza premere il bottone rosso.

Sul retro rimuovi la pellicola di plastica,  
per liberare la parte adesiva.

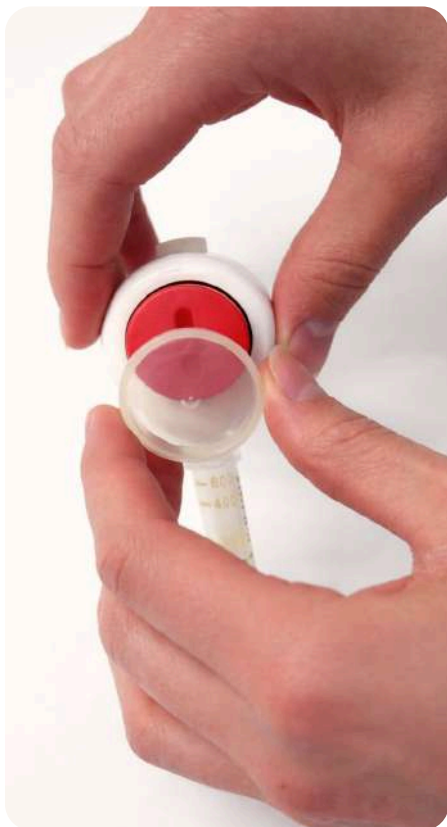

## Come applicare il Device

Applicalo ora sulla zona disinfettata e **premi con decisione sul bottone rosso fino a sentire un click**. Mantieni premuto per qualche secondo. Il sangue uscirà circa dopo un minuto.



## STEP 4

# Prelievo del sangue

Quando il sangue raggiunge la tacca dei 600ul, separa delicatamente il Device dalla pelle.

Applica il cerotto (4) in dotazione sulla zona trattata.



## STEP 5

# Chiusura della provetta

Ritappa la microtainer utilizzata e inseriscila nella provetta con il barcode (5). Spingila fino a che le due provette non sono incastrate l'una nell'altra.



## STEP 6

# Scuotere la provetta

A questo punto, scuoti lentamente la provetta per 10 volte.

Il movimento deve essere lento e controllato per facilitare il mescolamento del campione prelevato.



## STEP 7

# Preparare la spedizione

1. Inserisci la provetta prima nella biohazard bag piccola (A) e poi in quella grande blu (B) per il trasporto, insieme alle eventuali altre provette (urine e feci)
2. Metti la biohazard blu all'interno della scatola bianca (C)
3. Inserisci la scatola nella busta per la spedizione (D) e sigilla bene
4. Getta le componenti usate del kit per il test nei rifiuti domestici

